

DOORVOEREN


FUSIE VAN 2 KEUKENS




Karin Snoijs – van der Feen

PRINCIPE EN DOEL

- Doorvoeren heeft als doel om uitgesneden weefsel van waterbasis om te zetten naar paraffine
- Proces wordt uitgevoerd na fixeren en uitsnijden en indien nodig nog verder fixeren
- Na doorvoeren volgt het verdere histologische traject van inbedden, snijden en kleuren

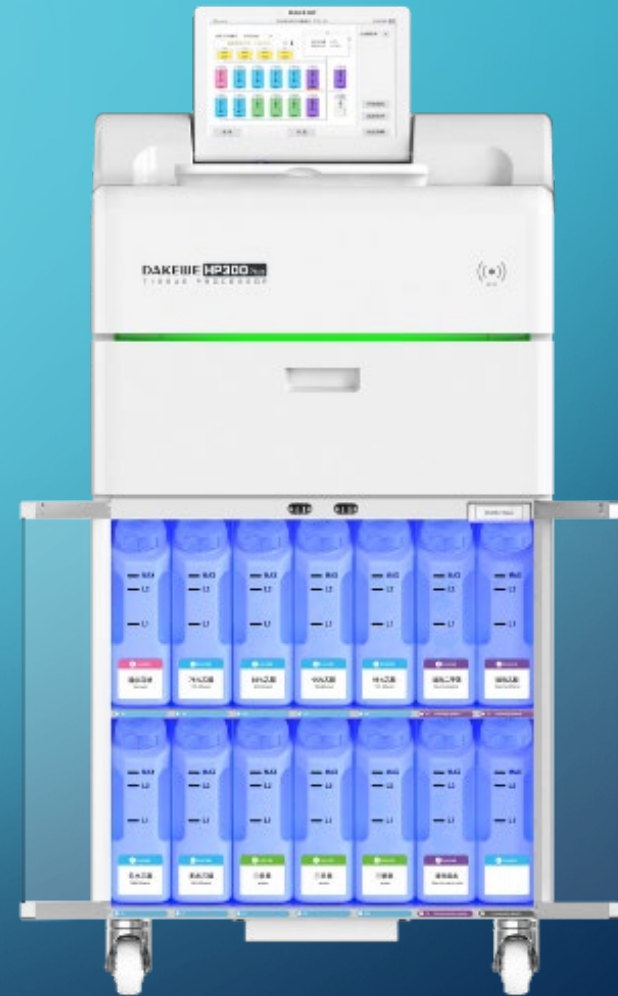

HET PRINCIPE

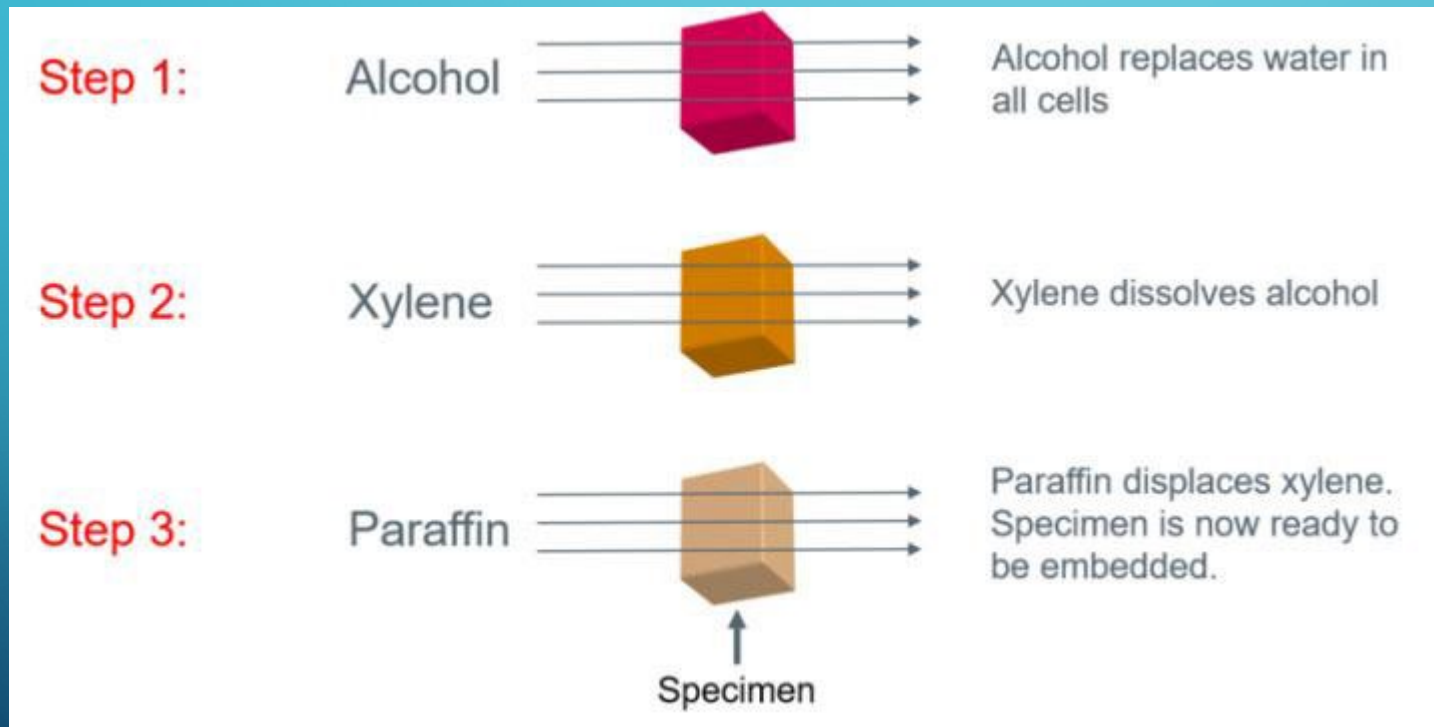

Dehydreren

Ophelderen

Impregneren

STANDAARDPROGRAMMA

NR.1	Vetprogramma					
	Machine uiterlijk starten om	13.00				
	Machine klaar om	6.30	Volgende dag			
Bad	Reagens	Tijd (uur)	Temp (°C)	P/V	Mix	
1	Formaline 4%	3.00	35	On	Continue	
2	ETHANOL 70%	1.00	35	On	Continue	
3	ETHANOL 80%	1.00	35	On	Continue	
4	ETHANOL 96%	1.00	35	On	Continue	
5	ETHANOL 100%	1.00	35	On	Continue	
6	ETHANOL 100%	1.00	35	On	Continue	
7	ETHANOL 100%	1.00	35	On	Continue	
8	XYLEEN	1.00	35	On	Continue	
9	XYLEEN	1.00	35	On	Continue	
10	XYLEEN	1.00	35	On	Continue	
11	PARAFFINE	1.00	62	On	Continue	
12	PARAFFINE	1.00	62	On	Continue	
13	PARAFFINE	1.00	62	On	Continue	
14	PARAFFINE	1.00	62	On	Continue	
	Totaaltijd	15 uur				

NB Starten met "Delayed start"

PROBLEMEN

- Vloeistoffen omgewisseld bij verschonen
- Reagensvaten niet goed geplaatst of onvoldoende gevuld
- Stroomuitval 🖱️
- 'Het krimpt nog wel' 🤔




DE FUSIE



- Van 2 universitaire ziekenhuizen naar 1 instituut op 2 locaties
- Verschuivingen binnen alle afdelingen
- Doel pathologie: histologielab op locatie AMC, uitsnijkamer op zowel locatie AMC en Vumc

CHALLENGE OF FUSION

- Wat worden de hoeveelheden cassettes van de gefuseerde afdeling en waar bevinden ze zich?
- Op welk moment in het proces wordt het door te voeren materiaal richting de doorvoermachines vervoerd?
- Welke programma's gebruiken we?
- Hoe laat starten we welke machines?

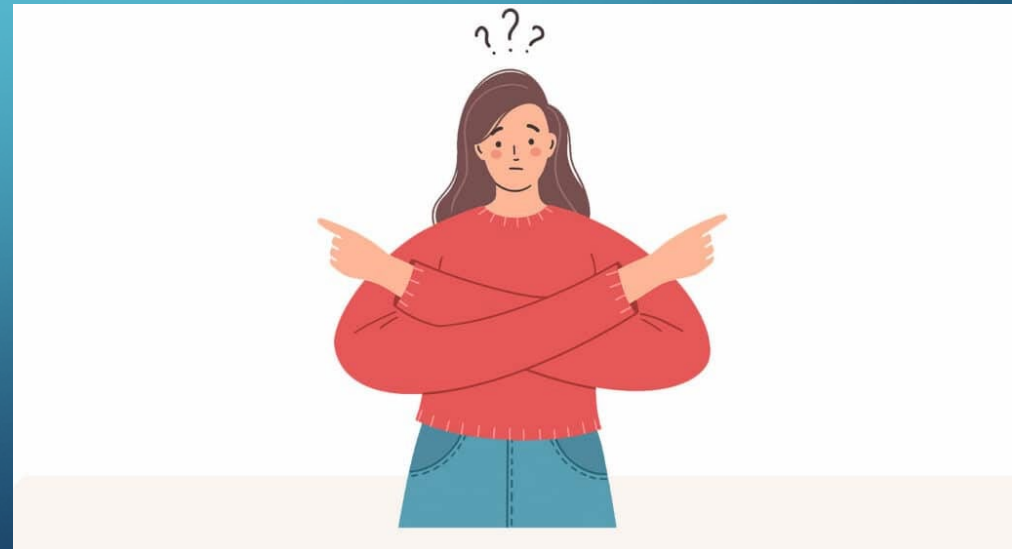

DOORVOERWAGENPARK

Excelsior AS



VIP 6 AI




Logos



PRACTISCHE INVULLING

- Aanpassing doorvoerschema's
- Het aantal cassettes per locatie is nog niet duidelijk
- Locatie van de cassettes
- Transport blijft variabel

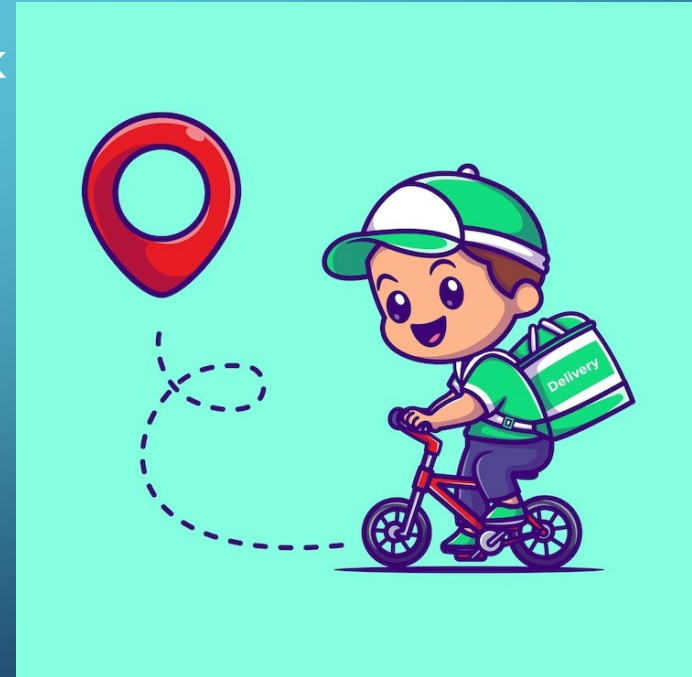

VRAGEN??

